

# ACCUVAC Basic

## Absaugpumpe zum Freimachen der Atemwege

Sekretrückstände in den Atemwegen behindern die Ventilation sowie den Gasaustausch und mindern so die Wirksamkeit der Beatmung. Erst nach Freimachen der Atemwege ist eine effektive Beatmung möglich. Mit der Sekret-Absaugpumpe ACCUVAC Basic ist die Absaugung des Mund- und Rachenraumes einfach und sicher durchzuführen. Dank der stufenlosen Unterdruckregulierung kann sie in jeder Situation eingesetzt werden – auch in der Pädiatrie.



ACCUVAC Basic,  
WM 10709



Einweg-  
Sammelbehälter



Wandhalterung  
inkl. Montageset

### Flexibel und praktisch

- auch für den pädiatrischen Bereich geeignet
- flexibel einsetzbar durch integrierten Akku

### Sicher

- robust und kippsicher
- hohe Patientensicherheit durch stufenlose Unterdruckregulierung von -0,05 bis -0,8 bar über den Drehschalter
- zusätzliche Unterdruckregulierung durch Absaugschlauch mit Fingertipp
- sichere Sekretaufnahme durch autoklavierbaren Mehrweg-Sammelbehälter mit Bakterienfilter bzw. durch Einweg-Sammelbehälter mit integriertem Überlaufventil

### Komfortabel

- schnelle Entriegelung und Entnahme des Geräts per Tastendruck
- sehr leise
- frontal integrierte Schlauchhalterung, Akku-Spannungsanzeige und seitlich montierbare Zubehörtasche
- mühelos zu reinigen und zu pflegen


### Lademanagement

- optional: praktische Wandhalterung mit integrierter Ladevorrichtung
- optional: Netz- und Ladegerät mit Weitbereichseingang für Laden und Betrieb am Netz
- optional: 12-V-Kabel für den Betrieb im Auto


### Sekret-Absauggeräte

Geräte-Bezeichnung	WM-Nr.
ACCUVAC Basic mit Einmal-Sammelbehälter und Steckerladegerät	10700
ACCUVAC Basic mit Mehrweg-Sammelbehälter und Steckerladegerät	10709
ACCUVAC Basic mit Einmal-Sammelbehälter, Wandhalterung und 12-V-Verbindungsleitung	10705
ACCUVAC Basic mit Mehrweg-Sammelbehälter, Wandhalterung und 12-V-Verbindungsleitung	10715


1

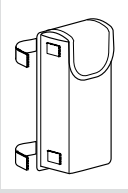


2

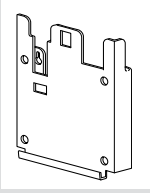


3

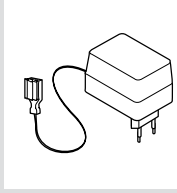


4

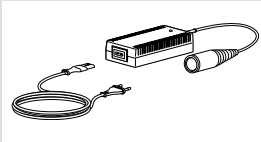


5

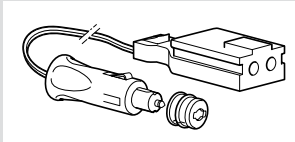

6

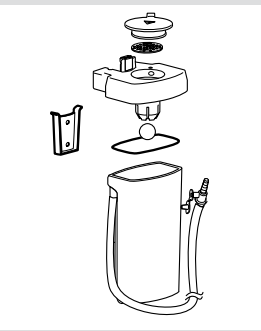

7

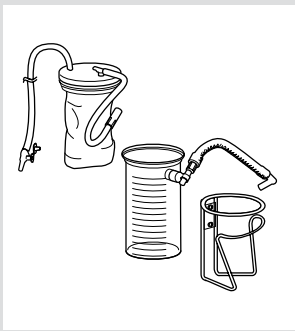

## Zubehör

- 1 **Zubehörtasche – WM 10655**
- 2 **Wandhalterung – WM 15208**  
inklusive Montageset
- 3 **Steckerladegerät – WM 10750**  
komplett mit Europastecker und Länderadaptern für US, GB und AU
- 4 **Bleiakku (o. Abb.) – WM 10747**
- 4 **Netz- und Ladegerät – WM 2610**  
für 100 bis 240 Volt Wechselspannung auf 12 V Versorgungsbuchse
- 5 **12-V-Verbindungsleitung – WM 10650**
- 6 **Umrüstsatz – WM 15261**  
**Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC**  
Der Umrüstsatz besteht aus:  
Set Mehrweg-Sammelbehälter (WM 15269),  
Halterset für Mehrweg-Sammelbehälter (WM 15271)
- 7 **Umrüstsatz – WM 15262**  
**Einmal-Sammelbehälter für ACCUVAC**  
Der Umrüstsatz besteht aus:  
Set Einmal-Sammelbehälter (WM 15268),  
Set Korbbalger (WM 15172)

Unser vollständiges Angebot an Therapielösungen, Zubehör, Maskensystemen und weiteren technischen Daten finden Sie unter: [www.weinmann.de](http://www.weinmann.de)

## Technische Daten ACCUVAC Basic



<b>Produktklasse nach 93/42/EWG:</b>	II b	<b>Saugleistung bei 12 V und freiem Flow:</b>	> 20 l/min
<b>Erfüllte Produktnormen:</b>	EN 60601-1 EN ISO 10079-1 EN 1789	<b>Maximaler Unterdruck bei 12 V:</b>	0,8 bar (80 kPa)
<b>Abmessungen (B x H x T):</b>	385 x 280 x 140 mm	<b>Schutzgrad gegen das Eindringen von Wasser:</b>	IPX 1
<b>Gewicht:</b>	ca. 5,4 kg	<b>Überlaufventilfilter:</b>	mind. 99,8 % bei Partikeln von 2,8 µm
<b>Temperatur</b> ■ Betrieb: ■ Lagerung:	-18 °C bis +40 °C -40 °C bis +70 °C	<b>Sekretbehälter:</b>	Einmal-Sammelbehälter Mehrweg-Sammelbehälter
<b>Ladespannung:</b>	12 V bis 13,8 V	<b>Sekretbehälter-Volumen:</b>	900 ml
<b>Motorleistung:</b>	50 W	<b>Überlaufsicherung:</b>	Überlaufventilfilter
<b>Maximale Stromaufnahme:</b>	3,5 A	<b>Saugschlauch:</b>	Ø 5 mm, Länge 1800 mm
<b>Akku-Typ:</b>	Blei, 3,4 Ah	<b>Nato-Versorg.-Nr.:</b>	6515-12-366-6181

■ **Deutschland** ■ Weinmann Geräte für Medizin GmbH+Co.KG · Postfach 540268 · 22502 Hamburg · Kronsaalweg 40 · 22525 Hamburg · E: [info@weinmann.de](mailto:info@weinmann.de) · [www.weinmann.de](http://www.weinmann.de) · T: 040-5 47 02-0 F: 040-5 47 02-461 ■ **Zentrum für Produktion, Logistik, Service** · Weinmann Geräte für Medizin GmbH+Co.KG · Siebenstücken 14 · 24558 Henstedt-Ulzburg · T: 04193-88 91-0 · F: 04193-88 91-450  
 ■ **Schweiz** ■ G. Weinmann AG – Neuenhof · T: +41-(0)56-416 41 11 · E: [info@ch.weinmann.de](mailto:info@ch.weinmann.de) · [www.weinmann.de](http://www.weinmann.de) ■ **Frankreich** ■ Weinmann S.A.S. – Paris-Igny · T: +33-(0)1 69 35 53 20 E: [info@fr.weinmann.de](mailto:info@fr.weinmann.de) · [www.weinmann.de](http://www.weinmann.de) ■ **Russland** ■ Weinmann SPb GmbH – St. Petersburg · T: +7-(812)6 33 30 82 · E: [info@ru.weinmann.de](mailto:info@ru.weinmann.de) · [www.weinmann.de](http://www.weinmann.de) ■ **China** ■ Weinmann GmbH+Co.KG · (Shanghai Rep. Office) · T: +86 21 32 26 26 98 · E: [info@cn.weinmann.de](mailto:info@cn.weinmann.de) · [www.weinmann.de](http://www.weinmann.de)

3002.2-01-DE-0409-3 © Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Weinmann. Alle Angaben aus drucktechnischen Gründen ohne Gewähr.