

emergency

COMBIBAG

Im Handumdrehen Erwachsene und Kinder beatmen

partner for life

WEINMANN
medical technology



COMBIBAG

*Im Handumdrehen Erwachsene und Kinder beatmen:
Ein Beatmungsbeutel, zwei Patientengruppen.*

Mit der einzigartigen Technologie von COMBIBAG, dem 2-in-1-Beatmungsbeutel für Erwachsene und Kinder, haben Sie immer den richtigen Beatmungsbeutel parat. Durch einfaches Drehen des Beutels um 180° variieren Sie die Volumina und passen das Tidalvolumen automatisch und schnell an den jeweiligen Patienten an.

Das Sicherheitsventil begrenzt den Beatmungsdruck und schützt den Patienten. Ganz gleich, ob Sie über Tubus oder Maske beatmen. Mit COMBIBAG gewinnen Sie Zeit, haben mehr Platz im Rettungskoffer und sparen auch noch Kosten.



COMBIBAG mit
Beatmungsmaske

Artikel-Nr.

COMBIBAG, Beatmungsbeutel ohne Masken	WM 11090
COMBIBAG, Beatmungsbeutel mit Maske, Gr. 5	WM 11020
COMBIBAG, Beatmungsbeutel mit zwei Masken, Gr. 5 u. Gr. 3	WM 11025
COMBIBAG, Beatmungsbeutel mit drei Masken, Gr. 5, Gr. 3 und Gr. 1	WM 11050



Mit COMBIBAG machen Sie die 180°-Wendung für mehr Zeit-, Platz- und Kostenersparnis

Vorteile, die überzeugen:

- Das intelligente Design von COMBIBAG ermöglicht das Verabreichen von kleinen Volumina für Kinder ab 10 kg und die Beatmung von Erwachsenen.
- höchste Sicherheit für Helfer und Patienten: Sicherheitsventil mit 2 Druckniveaus für Masken- und Tubusbeatmung
- vielfältige Anschlussmöglichkeiten: Verbesserung der Oxygenierung durch Anschlussmöglichkeit für Sauerstoffreservoir oder Demandventil
- einfache Reinigung und Desinfektion: einschaliger Aufbau für optimale hygienische Aufbereitung
- Wartung und Demontage ohne Werkzeug
- latexfrei: alle Bauteile aus Silikon oder Polysulfon
- Sie sparen Zeit, Platz und Kosten.



Anschluss passend für Sauerstoffreservoir oder OXYMAND Demandventil



Sicherheitsventil

Beatmung von Kindern und Erwachsenen durch einfaches Drehen



Zubehör und Ersatzteile für COMBIBAG

Zubehör

<p>1 Beatmungsmaske mit selbstfüllendem Wulst aus Silikon</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ für Erwachsene, Gr. 5 WM 5074 ■ für Kinder und Jugendliche, Gr. 3 WM 5082 ■ für Säuglinge, Gr. 1 WM 5086 <p>■ Set Silikon-Beatmungsmasken nach Rendell-Baker WM 15482</p> <p>2 OXYMAND Demandventil mit Adapter und Druckschlauch 1,5 m</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mit Anschlussstülle G 3/8" und Adapter für COMBIBAG WM 22127 ■ mit Stecker Typ Walther und Adapter für COMBIBAG WM 22128 ■ mit Stecker Typ DIN 13260 und Adapter für COMBIBAG WM 22129 <p>3 PEEP-Ventil, stufenlos einstellbar von 0-10 mbar WM 3215</p> <p>4 Sauerstoffreservoir WM 11052</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aufhängering neu, Ø 60 mm WM 1145/49 ■ Dichtscheibe Ø 30/35 x 0,5 mm WM 1145/82 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Balg WM 11001 ■ Ventilgehäuse WM 11002 ■ Beatmungsventil, ohne Sicherheitsventil WM 11003 ■ Ventilelement WM 11006 ■ Ventileinsatz WM 11007 ■ Einlassmembran WM 11008 ■ Ansaugstutzen, Innenteil WM 11021 ■ Ansaugstutzen, Außenteil WM 11022 ■ 2-Stufen-Sicherheitsventil WM 11030 ■ Beatmungsventil, komplett WM 11035 ■ Ansaugstutzen mit Einlassmembran WM 11051 ■ Sicherungsring 30 x 1,5 mm WM 50455
---	---

Technische Daten COMBIBAG




Zertifiziertes OM-System nach EN ISO 13485:2012 (EN ISO 13485:2006/EN ISO 13485)

Produktklasse nach 93/42/EWG:	IIa	Druckbegrenzung:	umschaltbar 20 mbar und 60 mbar
Anwendungsbereich:	Kindergriff 10 – 16 kg Körpergewicht Erwachsenengriff > 16 kg Körpergewicht	Gaseinlassanschluss:	Ø 6 mm
Volumen:	Kindergriff bis 500 ml Erwachsenengriff 500 bis 1200 ml	Patientenanschluss:	15 mm/22 mm nach ISO 5356
		Abmessungen (L x D):	340 x 130 mm
		Gewicht:	390 g
		Materialien:	latexfrei Ventile: Polysulfon Balg und Ventilmembran: Silikon

3142-01-DE-1211-1 © Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Weinmann. Alle Angaben aus drucktechnischen Gründen ohne Gewähr.

Das Unternehmen
Weinmann Geräte für Medizin GmbH+Co.KG:
Medizintechnik Made in Germany

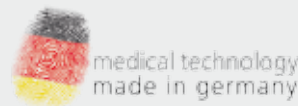

Simply professional

Auf Weinmann können Sie sich verlassen. Im Bereich mobile Lösungen rund um die Beatmung setzen wir Maßstäbe. Mehr als 130 Jahre Erfahrung und die konsequente Nähe zu unseren Partnern aus Rettungsdienst, Armeen/Behörden und Kliniken haben intelligente, perfekt aufeinander abgestimmte Technologien hervorgebracht. So kommen wir zusammen mit den Profis aus Notfall-, Transport- und Katastrophenmedizin unserem gemeinsamen Ziel, dem Retten von Menschenleben, näher.

Sie möchten mehr wissen?
 Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter
 +49-(0)40-547 02-120